

## Supplément au manuel d'utilisation

### Utilisation de ce supplément

Utilisez ce supplément conjointement avec le Manuel d'utilisation du laser FS lors de la réalisation d'une résection circulaire lamellaire intrastromale en option.

### Géométrie opérationnelle – Résection circulaire lamellaire intrastromale en option

Les canaux intrastromaux constituent une découpe circulaire sans découpe latérale à la profondeur désirée. La découpe circulaire est réalisée à un rayon interne prédéterminé en partant du centre de la cornée et se poursuit vers l'extérieur à la manière d'une spirale jusqu'à un rayon externe prédéterminé. Cette incision est suivie d'une petite incision d'entrée continue dans le sens radial qui commence à la profondeur du canal et progresse vers la surface de la cornée.

Une vue schématique par le dessus d'une résection du canal intrastromal est proposée dans la figure 1 ci-dessous (à gauche). L'incision d'entrée, représentée par la ligne continue en gras, est la seule ouverture pratiquée à la surface de la cornée. Une coupe transversale schématisée de la résection du canal est proposée dans la figure 2 ci-dessous (à droite). L'angle de vue est tel que l'incision d'entrée (rectangle gris) est parallèle au plan de la figure.

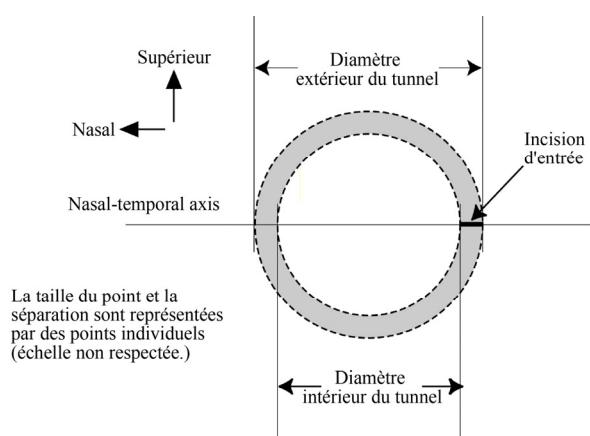


Figure 1

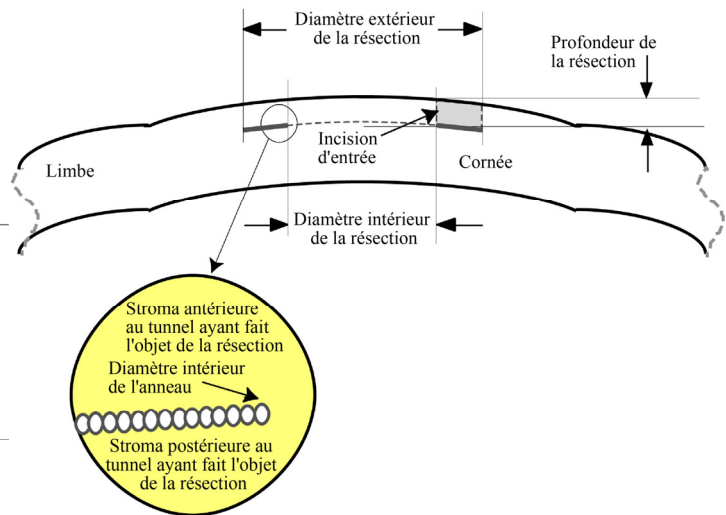


Figure 2

### Avertissements

Les avertissements suivants doivent être pris en compte pour une utilisation sans danger de la résection circulaire lamellaire intrastromale :



**AVERTISSEMENT** : l'utilisation de ce système avec l'application Résection circulaire lamellaire intrastromale en option nécessite que l'utilisateur fournisse un dispositif de mesure de l'épaisseur cornéenne étalonné.



**AVERTISSEMENT** : la profondeur dans la cornée d'une résection circulaire lamellaire intrastromale en option doit être programmée sur au moins 125 µm au-dessus de l'endothélium cornéen (c.-à-d. épaisseur cornéenne mesurée dans la zone d'incision prévue diminuée de 125 µm).